



FROGGYMOUTH

ПРАВИЛНА ФУНКЦИЯ НА ПРЕГЛЪЩАНЕ И ПОЗИЦИЯ НА ЕЗИКА

за 15 минути на ден

Инструкции за юноши и възрастни пациенти

ПРЕДПИСАН ВИ Е FROGGMOUTH

Това устройство коригира функцията на преглъщане, като създава нов модел: по време на преглъщане зъбите влизат в лек контакт и езикът се притиска към небцето.



Вашият специалист ви е дал **FroggyMouth**




Освободете се от лошите навици



С много **опростен** подход



Само за **15 минути** на ден, докато гледате телевизия

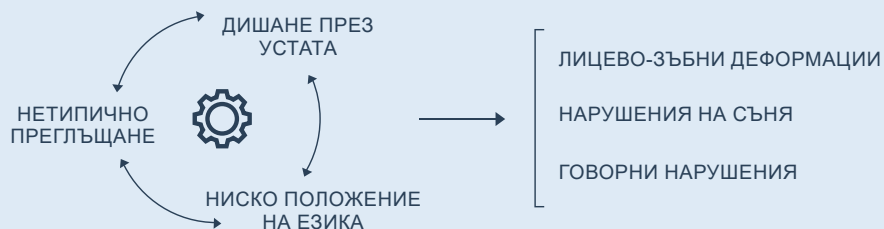

Всички тези клинични състояния имат едно общо нещо: всички те са свързани по различни начини с позицията на езика. In fact, 1/3 of the adult population still suffers from orofacial dysfunctions, with major impacts on overall health.

Чрез коригиране на дисфункцията при преглъщане, FroggyMouth помага за:


- По-кратка **продължителност на лечението**
- По-добро **качеството на резултатите**
- Намален **риска от рецидив**

FroggyMouth е съвместим с всички други ортодонтски апарати (сменяеми устройства, брекети или алайнери, например).



КАК РАБОТИ FROGGMOUTH?

FroggyMouth трябва да се носи 15 минути на ден, пред телевизора. Докато пациентът носи устройството, моделът на преглъщане се променя автоматично, без да нарушава качеството на съня, which is very important.

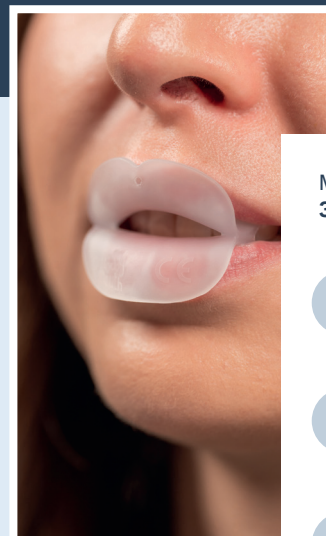

МОЛЯ, СЛЕДВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА FROGGMOUTH



FroggyMouth трябва да се носи **15 минути** на ден, пред телевизора. Докато пациентът носи устройството, моделът на преглъщане се променя автоматично, **без да нарушава качеството на съня**.



Носете пред повдигнат **телевизионен** екран или компютър. Това гарантира, че **хоризонталната визуална равнина** е непокътната, като по този начин се предотвратява всяка поза с наведена глава.



Вниманието на пациента трябва да бъде задържано от екрана, така че новият начин на преглъщане да стане **автоматичен и естествен**.

3 КЛЮЧОВИ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАПОМНИТЕ



Нормално е да почувствате повишено слюноотделяне при носене на устройството, особено в първите дни на употреба; ако това продължи повече от **10 дни**, уведомете Вашия лекуващ лекар.



Наблюдавайте няколко пъти на ден и докладвайте на вашия лекуващ лекар при следващия преглед, следните неща

Позата на езика ви в покой,

Наблюдавате ли отпускане на врата и раменете,

Наблюдавате ли подобрения в качеството на вашия сън



Трябва да носите устройството **ВСЕКИ** ден. Ако премахнете устройството през 15-минутния период, започнете отначало.



ПОЧИСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Почистете го с четката и пастата си за зъби. Подсушете го напълно и го поставете обратно в кутията му.





**WATCH THE VIDEO
ON THE RULES OF USE OF THE DEVICE**



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ДЕЙСТВИЕ НА ТОЗИ АПАРАТ, ПОСЕТЕТЕ:

WWW.FROGGYMOUTH.COM



Моля, внимателно прочетете инструкциите в листовката, предоставена с медицинското устройство.
FROGGYMOUTH – Медицинско изделие клас I – CE
Biotech Dental Smilers – 305 Allées de Craponne – 13300 Salon-de-Provence, Франция